


特許出願中

測定からグラフ化までが早い、

ナリカオリジナル

新方式記録タイマー!

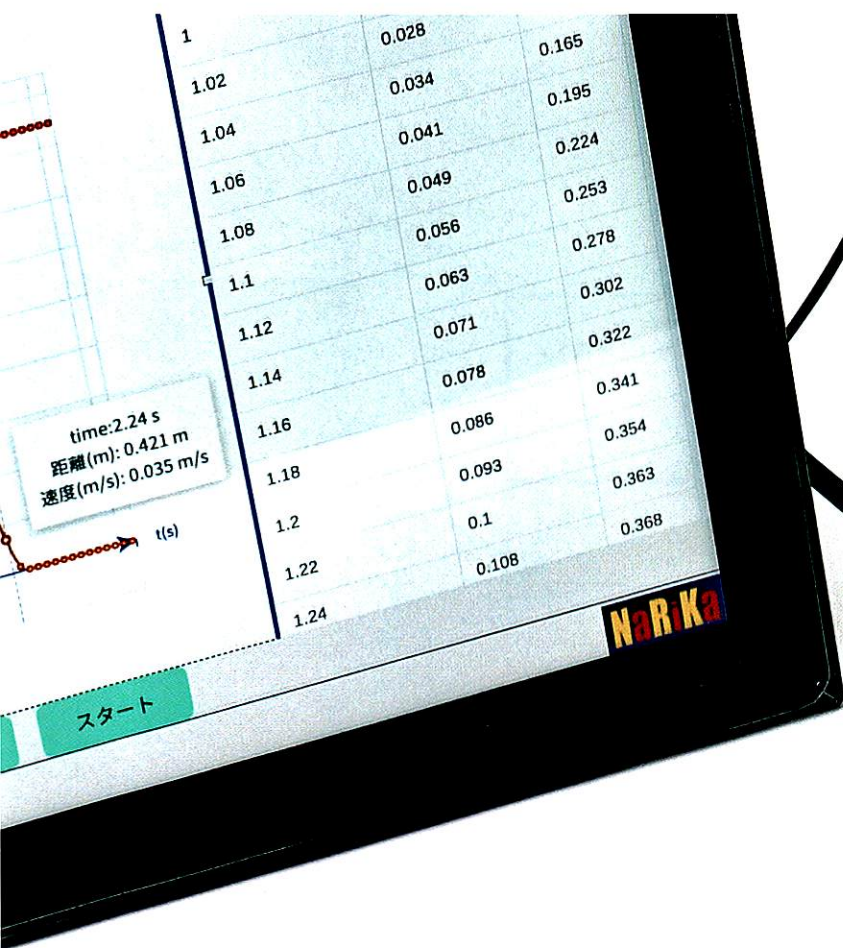

NEW

記録タイマー *d* (光学デジタル式)

置き換えるのは記録タイマーだけ！
授業方法、実験方法や器具を変える
必要はありません。

株式会社 ナリカ

記録タイマー d (光学デジタル式)

C15-1708 ￥9,500 (￥10,450)


村尾美明先生ご指導

NaRiKa
Original



ケーブルは
自動引き込み式

<収納のようす>

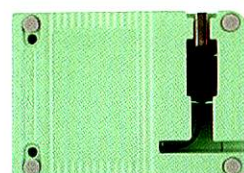

【仕様】

- 測定方式：光学イメージセンサ方式
- 測定距離：0～50m (※記録テープの長さによる)
- 最小表示：0.001m
- 測定間隔：0.02秒 ●出力：USB2.0
- 測定項目：距離 (m) / 時間 (s)
- 表示可能項目：距離 (m) / 速度 (m/s) / 加速度 (m/s²)
- その他：測定開始/停止ボタン、リアルタイム表示
- 対応OS：Windows10/11、ChromeOS
- 電源：USB給電
- 大きさ：85×60×40mm、ケーブル長1m (本体収納式)
- 付属品：記録テープ1巻

POINT

- ・記録タイマーを置き換えれば授業方法、実験方法、器具を変える必要はありません。
- ・記録テープは繰り返し使えます。
- ・厚紙で記録テープを自作すれば往復運動も測定できます。

インストール不要の
Webアプリ


OPTICAL-d-TIMER-WEB



インストール不要のWebアプリ
です。記録タイマーの測定値の
確認とグラフ作成を行います。

リアルタイム表示により運動の
ようすとグラフの変化を同時に
確認できます。

また、測定データは
CSVファイルに出力でき、
表計算ソフト上で自由に
グラフをデザインできます。

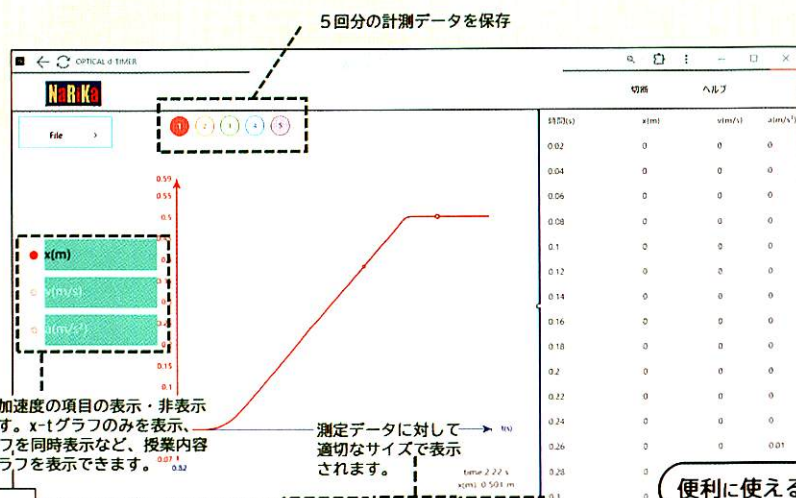

ご注文・ご用命はこちらへ

特約店

NaRiKa
SCIENCE IS JUST THERE

株式会社 ナリカ

<https://narika.jp/>
E-mail: support@rika.com


製品に関する技術的なお問合せ TEL : 0120-700-746
サポートセンター FAX: 03-3833-0743

ナリカオリジナル

打点強調式

特許出願中

搭載の記録タイマー

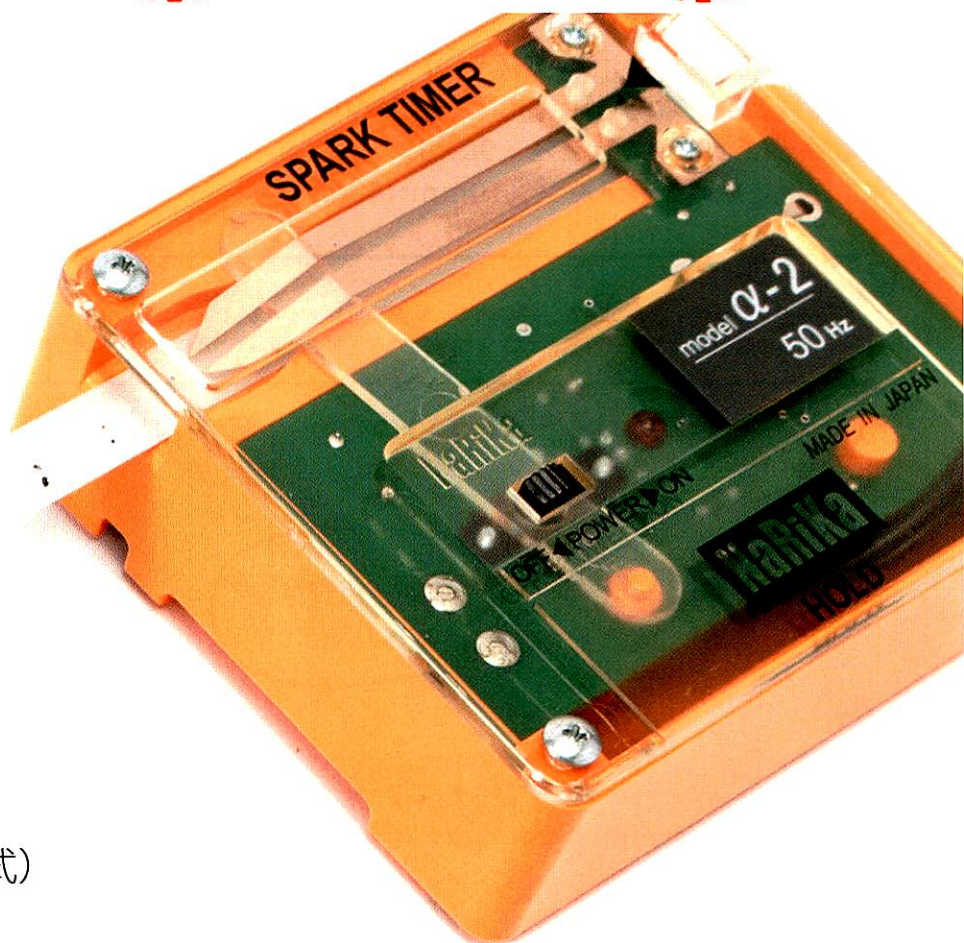

NEW

記録タイマー α-2 (放電式)

Point

01

打点強調式

- ・ 5打点ごと（60Hzの場合は6打点ごと）に大きく打点されるので分析作業が簡単、時間短縮
- ・ 目安があるので数え間違いのミス軽減

point

02

テープ幅は1cm

- ・ 方眼紙への貼付け
処理が簡単にできる

Point

03

テープのセットが簡単

- ・ 記録テープの挿入時はどちらの方向からでもスムーズにセットができる

株式会社 ナリカ

<https://www.rika.com/>

記録タイマー α-2 (放電式)

C15-1706-50~66

Cat.No.	電源周波数	数量	価格 ¥
C15-1706-50	50Hz	1	9,500 (10,450)
C15-1706-60	60Hz	1	9,500 (10,450)
C15-1706-53	50Hz	3	27,500 (30,250)
C15-1706-63	60Hz	3	27,500 (30,250)
C15-1706-56	50Hz	6	54,000 (59,400)
C15-1706-66	60Hz	6	54,000 (59,400)

※電源周波数の関係上50Hz地域、60Hz地域をご指定ください。

【仕様】

- 材質：ABS（本体）、AS（ふた）
- 放電周波数：電源同期（50Hzまたは60Hz）および打点強調式
- 電源：AC100V ■大きさ：90×97×37mm
- 付属品：放電記録テープ（10mm×40m）

放電式のここがすごい



- ・テープが軽くふれているだけなので、摩擦抵抗がすくない！
- ・自由落下のような速度変化の大きな運動でも、打点が鮮明で分析しやすい！

NaRiKa
Original



<収納のようす>

<実験のようす>

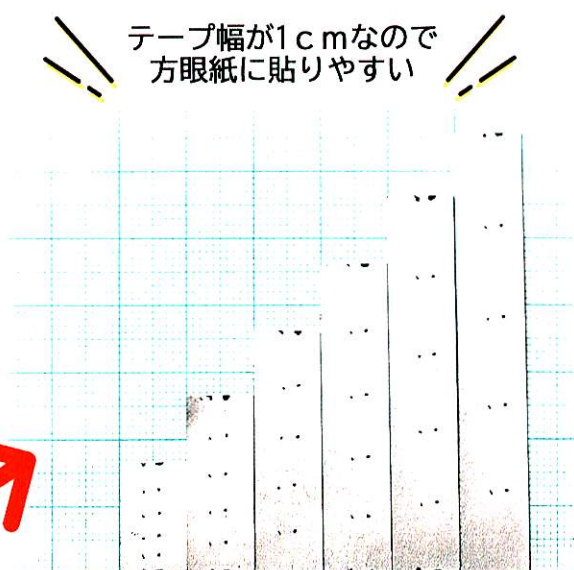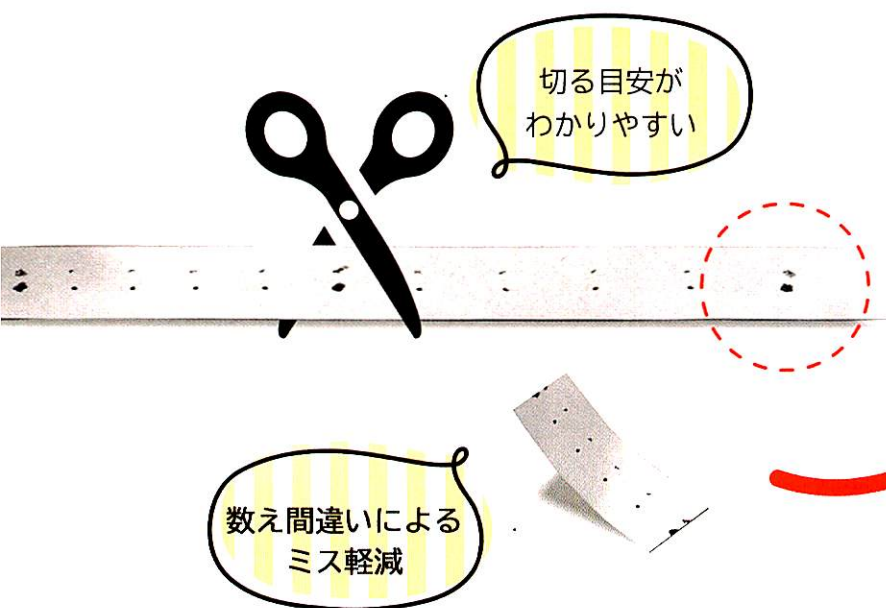

ご注文・ご用命はこちらへ

特約店

NaRiKa
SCIENCE IS JUST THERE

株式会社 ナリカ

<https://narika.jp/>
E-mail: support@rika.com

製品に関する技術的なお問合せ TEL : 0120-700-746
サポートセンター FAX: 03-3833-0743